






◆产品适用对象◆

材料学、生物学、医学和工业应用的研究和质量检查。做测量与记录时，若想将当下画面与数值做储存，只需将U盘插于显微镜欲记录的资料便可直接存入U盘。

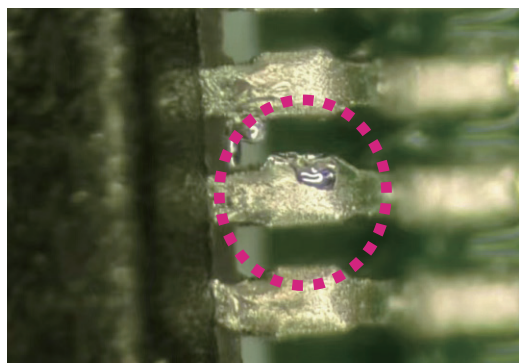

景深合成前

景深合成后

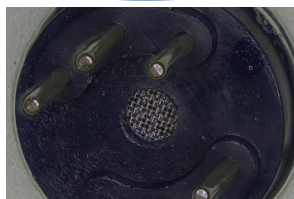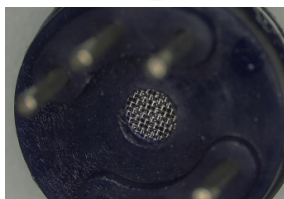

9513 特点

- 观察、测量、纪录为一体的高性价比专业电子显微镜
- 整合 Sony IMX385 1/2" CMOS，提供2百万像素的高清成像
- 相机高解析度1920x1080
- 别于一般数字变焦，採物镜光学变焦0.7-5x倍高清解析还原
- 最高5041倍的优异显示倍率（长宽71x71）
- 手动景深合成功能，一键生成符合全焦点的图像
- 多种易于使用的 2D 测量工具，包含两点间距、角度、直径、平行线、面积等
- 高亮度且可调节的 LED 照明，适用于各种不透明物体
- 可将图像和测量结果保存到 U 盘中
- 使用选配镜头也可以从不同角度观察物体
- 提供全套零件，开箱即用
- 适用于材料学、生物学、医学和工业应用的研究和质量检查

部件	规格	9513
相机	感测元件	SonyIMX385
	元件型式	CMOS
	光学元件尺寸	1/2"
	有效像素	2M (1920 * 1080)
	像素大小	3.75 μm * 3.75 μm
	有效感测器区域	7.2 mm * 4.05 mm
	快门	电子卷帘快门
	帧率	60帧
镜头	解析度	1920x1080
	扫描系统	有限共轭
	物镜放大倍率	0.7X-5X光学变焦，附煞车装置
	物镜数值孔径	3.6毫米~26毫米
显示器	工作距离	95毫米
	显示尺寸	11.6 吋 TFT 高解析度屏幕
	显示倍率	10X~71X
	原始解析度	1920x1080
照明	萤幕比	16:09
	亮度	400 nits (尼特)
	照明器类型	144-LED 环形灯
	亮度	可调节
基本性能	方向	入射照明
	电源需求	12VDC通用变压器
	USB连接埠	1个用于鼠标(或无线滑鼠/无线键盘) 1个用于 USB 盘
	区域网路	本款暂无开放此功能 可联系我们，加购升级此功能
	工作温度	0~70度C
	支架类型	带轨道的桌架
	底座尺寸	320x260x20毫米
	立柱尺寸	高度: 299 mm 宽度: 54 mm
	全套总尺寸	320x260x520毫米
	全套重量	7公斤
标准包装	带有轨道支架的显微镜 / 11.6 吋显示器 / 三个翼形螺丝 / 鼠标 / 交流电源转接器 / 防尘套	



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线：400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF